

INSUMO

RAW MATERIAL

☐

SUB-ENSAMBLE

SUB-ASSEMBLE

☐

PRODUCTO TERMINADO

FINISHED PRODUCT

☒

CATALOGO / CATALOG:	CÓDIGO / CODE:
360P145DLAFEP 550P145DLAFEP 280P145DLAFEP	004
DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION:	
SMART Equipo para hemodiálisis / SMART Hemodialysis kit	
APLICACIÓN / APPLICATION:	
Para el tratamiento agudo y crónico de hemodiálisis / For acute and cronical hemodialysis treatment	
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO / STORAGE CONDITIONS:	
A temperatura ambiente (15-30°C), humedad relativa no mayor a 70%, bien ventilados, libre de polvo, protegido de luz solar / Must be maintained on environmental temperature (15-30°C), relative humidity not higher than 70%, well ventilated, free of dust, protected from sunlight	
CONDICIONES DE ENTREGA / DELIVERY CONDITIONS:	
Empaque individual con un equipo estéril / Individual packaging with one sterile kit	
MATERIAL / MATERIAL	
Adaptador en "Y": Pieza de plástico semirrígido, la cual está ensamblada en su extremo proximal al catéter. El extremo opuesto deriva en dos ramales, los cuales tienen ensamblados dos conectores Luer hembra rosca, uno arterial y otro venoso, identificados con los colores rojo y azul, respectivamente. / <i>Semi rigid plastic piece assembled in its proximal end to the catheter. From the opposite end, derive two branches, which are assembled to two Luer female threaded connectors, one arterial and other venous, identified with red and blue colors respectively.</i> Catéter: Conducto tubular elaborado de poliuretano, de dos lúmenes que permita el libre desplazamiento de la guía introductora a través de uno de lúmenes, el extremo distal está ensamblado firmemente a un adaptador de plástico semirrígido en forma de "Y". / <i>Tubular conduit made from silicone elastomer, of two lumens to allow free movement of the introducer guide through one of the lumens, the distal end is firmly attached to a plastic adapter en "Y".</i> Aguja introductora: Cánula de acero inoxidable en punta, ensamblada firmemente a un conector hembra Luer con rosca / <i>Beveled stainless steel cannula and tapered at one end and the other firmly assembled to a threaded plastic Luer</i> Guía: Alambre de acero inoxidable entorchado, con punta en "J", de diámetro uniforme, que bajo condiciones de uso normal es lo suficientemente flexible para deslizarse adecuadamente en el torrente sanguíneo. / <i>Stainless steel wire, twisted, of uniform diameter, tipped in a "J" under conditions of use is flexible enough to slide properly into the blood stream.</i> Dilatador: Conducto tubular de plástico, que presenta una disminución en el diámetro del extremo proximal; su extremo distal está firmemente ensamblado a un pabellón. / <i>Plastic tubular conduit, presenting a reduction of diameter in its proximal end; the distal end is firmly assembled to a pavilion</i> Dispositivo de fijación ajustable: Dispositivo de plástico flexible que garantice que una vez colocado en el sitio no tenga movimiento el catéter, tiene dos bordes o salientes que permiten su fijación a la piel por medio de puntos de sutura. / <i>Plastic device that ensures that once place in site the catheter will not move; it has two edges or projections which allow attachment to the skin by sutures.</i> Jeringa: Dispositivo de plástico transparente, diseñado para evitar extravasación de sangre, así como evitar el embolismo aéreo, durante la venopunción. / <i>Transparent plastic device design to prevent blood extravasations.</i> Cápsula de inyección: Tapón protector Luer macho roscado el cual tiene una membrana de silicón / <i>Protective Luer lock mach cap that has a silicone membrane.</i> Protector de la aguja y de la guía: Piezas elaboradas con plastic semirrígido, las cuales protegen a la aguja y guía de posibles daños. / <i>Semi rigid plastic pieces, that protect the needle and guide from possible harms.</i>	
DIMENSIONES / DIMENSIONS	
Catéter de 14.5 Fr / 36 cm de longitud / Catheter of 14.5 Fr / 36 cm long	
CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS	
Producto estéril, esterilizado con óxido de etileno, desechable de un solo uso / Sterile product, sterilized with ethylene oxide, disposable single use.	
REQUIERE CERTIFICADO ANALÍTICO DE CALIDAD / ANALITICAL QUALITY CERTIFICATE REQUIRED	SI / YES

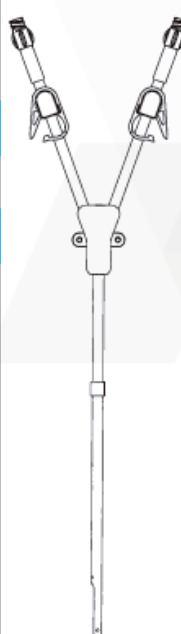
CLAVE (CODE)	PRUEBA (TEST)	INTERPRETACIÓN (INTERPRETATION)	NCA (AQL)	NIVEL (LEVEL)	REFERENCIA (REFERENCE)
FM001	ACABADO / FINISH	PARTE PLÁSTICAS CRÍTICOS Ampollas por humedad del material, incrustaciones, manchas, piezas manchadas. Libres de fisura, deformaciones, burbujas, oquedades, rebabas, bordes filosos, rugosidades, roturas, delaminaciones, desmoronamientos, material infusible, material extraño, partes chiclosas o reblandecidas, nódulos. MAYORES Color no uniforme. Manchas, marcas, tinta o rayas muy leve / PLASTIC PARTS CRITICAL <i>Blisters due to material humidity, inlays, stains, stained pieces. Free of deformations, chewy parts, bubbles, voids, burrs, roughness, cracks, delaminations, infusible materials, foreign material, sharp edges, nodules and blisters.</i> MAJOR <i>Uneven color. Stains, marks, ink or smooth lines</i> PARTES METÁLICAS CRÍTICOS Libres de corrosión a simple vista. Libres de muescas, rebabas, deformaciones, fisuras, fracturas, marcas de esmerilado, muescas, poros, partes romas en el filo y punta de la aguja. La aguja tiene un pulido final a espejo o satinado y el alambre de la guía está entorchado. MAYORES Rebabas no desprendibles filosas, material extraño MENORES Rebabas no desprendibles sin filo, opaco / METALLIC PARTS CRITICAL <i>Free of corrosion to naked eye, free of burrs, blunt tips or deformations, cracks, grind marks, fractures, notches, pores and deformations. The needle has a polished mirror end.</i> MAJOR <i>Non-removable sharp burrs, foreign material</i> MINOR <i>Non-removable dull burrs, opaque</i> MATERIAL DE EMPAQUE CRÍTICOS Envase diferente al especificado. Envase primario mal sellado, roto o abierto. Datos o leyendas de un producto diferente en envase primario o secundario. Partículas de material extraño o contaminante dentro del producto. Falta de instrucciones de uso y advertencias en envase primario, piezas rotas, faltantes, desensambladas o sueltas. Ausencia de datos o leyendas o si está ausente o ilegible en el envase primario alguno de los siguientes datos: Denominación de lumen de catéter, Calibre Fr o diámetro exterior del catéter, longitud nominal del catéter, calibre de la aguja, tipo de esterilización, nombre genérico del producto, "Desechable", "Radiopaco", número de lote, marca, logotipo, razón social o nombre del fabricante, importador y distribuidor en envase primario, "Estéril", "Atóxico" y "libre de pirógenos" (o leyendas alusivas). Ausencia de número de lote, fecha de caducidad, cualquier instrucción especial para manipuleo y/o almacenaje	1.0 2.5 6.5	G-II	FEUM Suplemento para Dispositivos Médicos MGA-DM 1241

		MAYORES Envase primario sucio, manchado o deteriorado. No cumplir con otros requisitos de etiquetado indicados en la legislación aplicable. Material extraño dentro del producto, fuera del envase primario. Si está ausente alguno de los siguientes datos o leyendas en envase primario: calibre de la aguja, longitud de la aguja, "Producto estéril y libre de pirógenos", "No se garantiza la esterilidad en caso de que el envase primario haya sufrido ruptura previa" (o leyendas alusivas) y número de registro otorgado por la Secretaría de Salud. MENORES Etiquetas rotas y desgarradas, pero con información legible y completa PACKAGING MATERIAL CRITICAL <i>Primary packaging different from specified. Primary packaging poorly sealed, broken or opened. Data or legends of a different product in primary or secondary packaging. Foreign material inside primary packaging. Lack of instructions and warnings on primary packaging. Broken, missing, disassembled or loose pieces. Lack of data or legends or is absent or illegible in primary packaging any the following data: Designation of lumen catheter, Fr caliber or outer diameter of the catheter, nominal length of the catheter, needle gauge, method of sterilization, generic product name, "Disposable", "Radiopaque", lot number, brand, logo, company name or name of the manufacturer, importer and distributor in primary packaging, "Sterile", "Non-toxic" and "pyrogen free" (or allusive legends). Absence of lot number, expiration date, any special instructions for handling and / or storage.</i> MAJOR <i>Primary packaging stained, dirty or damaged. Failure to comply with other labeling requirements indicated in the applicable law. Foreign material inside the product, outside the primary packaging. If any of the following are missing in primary packaging: needle gauge, needle length, "sterile and pyrogen free product", "sterility is not guaranteed if the primary packaging is broken" (or allusive legends) and registration number given by the Ministry of Health</i> MINOR <i>Labels broken and torn but legible and complete.</i>			
FM002	DIMENSIONES / DIMENSIONS	De acuerdo a presentación debe cumplir con las dimensiones correspondientes indicadas en la tabla anexa / <i>According to presentation must meet the corresponding dimensions indicated in attached table.</i>	1.0	S-3	FEUM Suplemento para Dispositivos Médicos Monografía de producto
FM003	INTEGRIDAD / INTEGRITY	No debe presentar fuga o burbujeo en ningún ensamble o componente al aplicar una presión de aire de 0,51 kgf/cm ² durante 10 s / <i>Must not leak or bubble in any assembly or component applying an air pressure of 0.51 kgf/cm² for 10 s</i>	1.0	S-2	FEUM Suplemento para Dispositivos Médicos Método General MGA-DM 0841 Método A
FM004	RESISTENCIA A LOS ENSAMBLES / RESISTANCE OF ASSEMBLIES	El ensamble no debe desprenderse con una fuerza de tensión de 1,5 kgf durante 15 s / <i>The joints must not detach with a tensile force of 14.71 N (1.5 kgf) for 15 sec</i>	1.0	S-2	FEUM Suplemento para Dispositivos Médicos Método General MGA-DM 1714
FM005	VERIFICACIÓN DE LA CONICIDAD / VERIFICATION OF THE TAPER	- Medición con escantillón: El oscilamiento no debe ser evidente entre el escantillón y el ensamble hecho del material sometido a prueba. - Fuga de líquido: No debe haber fuga que permita formar una gota de agua.	1.0	S-3	FEUM Suplemento para Dispositivos Médicos Método General MGA-DM 0252

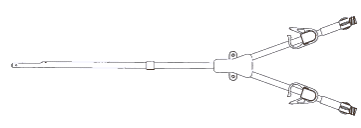
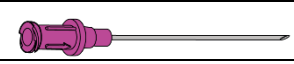
		• Fuga de aire: La formación continua de burbujas no debe ser evidente. • Fuerza de separación: El conector cónico dentro de la prueba debe permanecer unido al escantillón de referencia. • Agrietamiento por estrés (esfuerzo por presión o tensión): No debe haber evidencia de agrietamiento por estrés en el conector cónico • <i>Scantling measurement: Oscillation should not be evident between the scantling and the assembly made of the material under test.</i> • <i>Leakage of liquid: There should be no leakage that allows to form a drop of water.</i> • <i>Air leak: The continuous formation of bubbles should not be evident.</i> • <i>Separating force: The conical connector inside the test must remain attached to the reference scale.</i> • <i>Stress cracking (stress by pressure or tension): There must be no evidence of stress cracking in the conical connector</i>			
FM006	MARCADO DEL PRODUCTO / <i>PRODUCT MARKING</i>	Tiene impreso en forma legible e indeleble el calibre, longitud y la denominación de la vía que corresponde a cada línea de extensión (proximal, medio y distal) con excepción del catéter de un lumen que exclusivamente lleva marcado el calibre. De acuerdo a la longitud del catéter lleva marcas indicadoras de profundidad en forma legible e indeleble. / <i>It has printed legibly and indelibly the gauge, length and name of the corresponding track for each extension line (proximal, middle and distal) with the exception of the catheter of one lumen which is marked with the gauge only. According to the length of the catheter, it is marked with legibly and indelibly indicators of depth.</i>	1.0	S-2	FEUM Suplemento para Dispositivos Médicos Monografía de producto
FM038	VELOCIDAD DE FLUJO EN EL CATÉTER / <i>FLOW RATE THROUGH CATHETER</i>	De 90 a 115 % del valor indicado en etiqueta individual del equipo / <i>90 to 115% of the indicated values in the individual kit label</i>	1.0	S-2	FEUM Suplemento para Dispositivos Médicos Monografía de producto de catéter para hemodiálisis
FM058	RADIOPACIDAD / <i>RADIOCAPACITY</i>	Catéter debe cumplir la prueba / <i>Catheter must meet the test</i>	1.0	S-2	FEUM Suplemento para Dispositivos Médicos Método General MGA-DM 1701
FS002	IDENTIFICACIÓN DE PLÁSTICOS / <i>IDENTIFICATION OF PLASTICS</i>	Las muestras analizadas deberán de cumplir con las propiedades generales indicadas / <i>The samples tested must comply with the general properties listed</i>	N/A	N/A	FEUM Suplemento para Dispositivos Médicos Método B MGA-DM 1541
FS008	RESISTENCIA A LA CORROSIÓN / <i>CORROSION RESISTANCE</i>	Las superficies de las piezas no presentan indicios de corrosión / <i>The surface of the pieces doesn't show signs of corrosion</i>	1.0	S-2	FEUM Suplemento para DM Método III MGA-DM 1712
MB002	ESTERILIDAD / <i>STERILE</i>	Debe ser estéril / <i>Must be sterile</i>	N/A	N/A	FEUM Suplemento para Dispositivos Médicos MGA-0381
EXTERNO	PIRÓGENOS / <i>PYROGENS</i>	Ningún conejo debe mostrar un incremento individual de 0.5 °C o más con respecto a su temperatura de control. / <i>No rabbit should show a single increment of 0.5 °C or more with respect to the control temperature</i>	N/A	N/A	FEUM Suplemento para Dispositivos Médicos MGA 0711
EXTERNO	ÍNDICE HEMOLÍTICO /	La solución del patrón de referencia y la muestra, no deben tener coloración roja. El coeficiente de extinción de la muestra no debe exceder al del patrón de	N/A	N/A	FEUM Suplemento para DM Método General

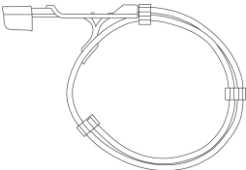
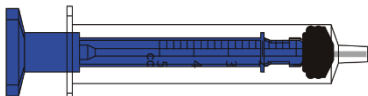
	HAEMOLYTIC INDEX	referencia por más de 0.03 / <i>The solution of the reference standard and sample should not be red coloration. The extinction coefficient of the sample must not exceed the reference standard by more than 0.03</i>			MGA 3082
EXTERNO	REACTIVIDAD INTRACUTÁNEA / INTRACUTANEOUS REACTIVITY	Los componentes plásticos deben cumplir la prueba. La diferencia entre el valor promedio de reacciones de la muestra y el blanco es de 1.0 o menor / <i>The plastic components must pass the test. The difference between the sample average value and the target must be 1.0 or less.</i>	N/A	N/A	FEUM Suplemento para Dispositivos Médicos Método General MGA-DM 3171
EXTERNO	INYECCIÓN SISTÉMICA / SYSTEMIC INJECTION	Los componentes plásticos deben cumplir la prueba. Los animales tratados no deben presentar reacción biológica significativamente mayor a los tratados con el blanco / <i>The plastic components must meet the test. Treated animals must not present significantly more biological reactions than the treated targets.</i>	N/A	N/A	FEUM Suplemento para Dispositivos Médicos Método General MGA-DM 3083
EXTERNO	IMPLANTACIÓN / IMPLANTATION	Los componentes plásticos deben cumplir la prueba. La diferencia no excede de 1.0 o si la diferencia entre los valores de la muestra y el medio de control para cada uno de los cuatro sitios de implante no excede de 1.0 para cualquier material implantado / <i>The plastic components must pass the test. The difference not exceeds 1.0 or if the difference between the sample values and control means for each of the four implant sites does not exceed 1.0 for any implanted material</i>	N/A	N/A	FEUM Suplemento para Dispositivos Médicos Método General MGA-DM 3081
EXTERNO	METALES PESADOS / HEAVY METALS	Plásticos: No más de 1 ppm Hules: No más de 5 ppm / <i>Plastics: no more than 1 ppm Rubber: no more than 5 ppm</i>	N/A	N/A	FEUM Suplemento para Dispositivos Médicos Método General MGA 0561 Método I
EXTERNO	RESIDUOS DE ÓXIDO DE ETILENO Y ETILENCLORHIDRINA / ETHYLENE OXIDE AND ETHYLENE CHLOROXYDRIN RESIDUES	ETO: 60 mg/30 días / <i>60 mg/ 30 days</i> ECH: 60 mg/30 días / <i>60 mg/ 30 days</i>	N/A	N/A	FEUM Suplemento para Dispositivos Médicos
EXTERNO	DETERMINACIÓN DE CONTAMINACIÓN POR PARTÍCULAS / DETERMINATION OF PARTICLE POLLUTION	No debe tener más de 100 partículas de 25 a 50 µm. No debe tener más de 20 partículas de 51 a 100 µm. No debe tener partículas mayores de 100 µm / <i>Must not contain more than 100 particles from 25 to 50 microns Must not contain more than 20 particles from 51 to 100 microns Must not contain particles larger than 100 microns</i>	N/A	N/A	FEUM Suplemento para Dispositivos Médicos MGA-DM 0253
EXTERNO	ACIDEZ O ALCALINIDAD / ACIDITY OR ALKALINITY	El pH de la muestra no varía en más de 1.0 unidad con respecto al blanco de referencia / <i>The pH of the sample does not change by more than 1.0 unit with respect to the reference</i>	N/A	N/A	FEUM Suplemento para Dispositivos Médicos Método General MGA-DM 0001 Método II
EXTERNO	COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL ACERO INOXIDABLE / CHEMICAL COMPOSITION OF STAINLESS STEEL	Acero con al menos 10.5 % de fracción del peso como Cr (cromo) y un máximo del 1.2 % de fracción del peso como C (carbono) / <i>Steel with at least 10.5 % weight fraction as Cr (Chromium) and a maximum of 1.2 % of weight fraction as C (carbon)</i>	N/A	N/A	FEUM Suplemento para Dispositivos Médicos Anexo 1 de los MGA-DM
EXTERNO	DUREZA ROCKWELL / ROCKWELL HARDENESS	La dureza de la cánula es de 345 DV a 484 DV (351DK a 510 DK) / <i>The hardness of the cannula is 345 – 484 DV (351 – 510 DK)</i>	N/A	N/A	FEUM Suplemento para Dispositivos Médicos MGA-DM 0352

Ficha Técnica

Catálogo	Longitud útil de catéter*	Longitud cojinete-punta
360P145DLAFEP	36 cm	30.5 cm
Aguja introductora	Jeringa (mL)	
18 G x 70 mm	5 mL	
Introduccion con válvula	Guía de alambre	
1 pieza	1 pieza	
Sitio de inyección	Tunelizador	
2 piezas	1 pieza	
*Catéter recto doble lumen de 14.5 Fr de extensiones rectas con obturadores Producto Esterilizado con Óxido de Etileno, Desechable, Libre de pirógenos y Atóxico SMART Catéter Altos Flujos de poliuretano		

Componentes (desglose general de componentes del equipo)

360P145DLAFEP (Equipo para hemodiálisis)		
Componente	Descripción	Cantidad por Kit (Piezas)
	Catéter temporal para Hemodiálisis, tamaño pediátrico de doble lumen de elastómero de silicón	1 pieza
	Aguja introductora calibre 18 G	1 pieza
	Dilatador	2 piezas

	Guía de alambre de 0.035" con longitud mínima de 60.0 cm	1 pieza
	Jeringa Raulerson de 5 mL	1 pieza
	Tapón de inyección	2 piezas