

INSUMO

 RAW MATERIAL ☐

SUB-ENSAMBLE

 SUB-ASSEMBLE ☐

PRODUCTO TERMINADO

 FINISHED PRODUCT ☒

CATALOGO / CATALOG:	CÓDIGO / CODE:
EB-P5050EP EB-P7050EP EB-P9650EP	003
DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION:	
BIOACCESS – Equipo vascular con catéter y puerto de titanio / <i>BIOACCESS - Vascular equipment with catheter and titanium port</i>	
APLICACIÓN / APPLICATION:	
Para acceso vascular repetido para infusión de fármacos, nutrición parenteral, obtención o administración de productos sanguíneos / <i>Repetead vascular access for drug infusion, parenteral nutrition, obtaining or administration of blood products</i>	
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO / STORAGE CONDITIONS:	
A temperatura ambiente (15-30°C), humedad relativa no mayor a 70%, bien ventilados, libre de polvo, protegido de luz solar / <i>Must be maintained on environmental temperature (15-30°C), relative humidity not higher than 70%, well ventilated, free of dust, protected from sunlight.</i>	
CONDICIONES DE ENTREGA / DELIVERY CONDITIONS:	
Empaque individual con un equipo estéril / <i>Individual packaging with one sterile kit</i>	
MATERIAL / MATERIAL	
Catéter de silicón radiopaco y puerto de titanio con centro de silicón, integrado con componentes de material grado médico, utilizados para su colocación, previamente evaluados como insumos / <i>Silicone catheter radiopaque and titanium port with sylicon center, integrated with medical grade materials components, used for placement, previously evaluated as inputs</i>	
DIMENSIONES / DIMENSIONS	
Catéter de 5, 7 y 9 Fr y 50 cm de largo / <i>Catheter of 5, 7 y 9 Fr and 50 cm length</i>	
CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS	
Producto estéril, esterilizado con óxido de etileno, desechable de un solo uso, que cuenta con: - Puerto Vascular de titanio - Catéter radiopaco de silicón - Aguja introductora - Aguja tipo Huber - Aguja tipo Huber con extensión - Camisa introductora - Dilatador - Guía de alambre con punta en "J" - Tunelizador - Jeringa de plástico / Sterile, sterilized product with ethylene oxide, disposable, one that has: - Titanium vascular port - Radiopaque silicone catheter - Introducing needle - Huber needle - Huber needle with extension - Introductory sheat - Dilator - Guidewire with "J" point - Tunneler - Plastic syringe	
REQUIERE CERTIFICADO ANALÍTICO DE CALIDAD / ANALITICAL QUALITY CERTIFICATE REQUIRED	SI / YES

CLAVE (CODE)	PRUEBA (TEST)	INTERPRETACIÓN (INTERPRETATION)	NCA (AQL)	NIVEL (LEVEL)	REFERENCIA (REFERENCE)
FM001	ACABADO / FINISH	PARTES PLÁSTICAS - CRÍTICOS 1. Ampollas por humedad del material 2. Incrustaciones 3. Manchas 4. Piezas manchadas 5. Libres de fisura, deformaciones, burbujas, oquedades, rebabas, bordes filosos, rugosidades, roturas, delaminaciones, desmoronamientos, material infusible, material extraño, partes chiclosas o reblandecidas, nódulos. 6. Piezas faltantes, sueltas o desensambladas. El diámetro exterior del catéter es uniforme, excluyendo la punta que tiene un desvanecimiento. MAYORES 1. Color no uniforme. 2. Manchas, marcas, tinta o rayas muy leves. PLASTIC PARTS - CRITICAL 1. <i>Blisters for material humidity</i> 2. <i>Inlays</i> 3. <i>Stains</i> 4. <i>Stained pieces</i> 5. <i>Free of deformations, chewy parts, bubbles, voids, burrs, roughness, cracks, delaminations, infusible materials, foreign material, sharp edges, nodules and blisters</i> 6. <i>Missing, lose or dissembled parts. The outer diameter of the catheter is even, excluding the faded tip</i> MAJOR 1. <i>Uneven color</i> 2. <i>Stains, marks, ink or smooth lines</i>	Crítico 1.0 Mayor 2.5 Menor 6.5	G-II	FEUM Suplemento para Dispositivos Médicos MGA-DM 1241
		PARTES METÁLICAS - CRÍTICOS 1. Libres de corrosión a simple vista. 2. Libres de muescas, rebabas, deformaciones, fisuras, fracturas, muescas, poros, partes romas en el filo y punta de la aguja 3. La aguja tiene un pulido final a espejo satinado. MAYORES 1. Rebabas no desprendibles filosas. 2. Material extraño. MENORES 1. Rebabas no desprendibles, sin filo. 2. Opaco. METALLIC PARTS - CRITICAL 1. <i>Free of corrosion to naked eye</i> 2. <i>Free of burrs, blunt tips or deformations, cracks, fractures, nicks, pores and deformations.</i> 3. <i>The needle has a polished mirror end.</i> MAJOR 1. <i>Non removable sharp burrs.</i> 2. <i>Foreign material.</i> MINOR 1. <i>Non removable dull burrs.</i> 2. <i>Opaque.</i> MATERIAL DE EMPAQUE - CRÍTICOS 1. Envase diferente al especificado 2. Envase primario mal sellado, roto o abierto 3. Datos o leyendas de un producto diferente en envase primario o secundario. 4. Partículas de material extraño o contaminante dentro del producto. 5. Falta de instrucciones de uso y advertencias en envase primario 6. Piezas rotas 7. Piezas faltantes			

		8. Piezas desensambladas o sueltas 9. Ausencia de datos o leyendas o si está ausente o ilegible en el envase primario alguno de los siguientes datos: Denominación de lumen de catéter, Calibre Fr o diámetro exterior del catéter, longitud nominal del catéter, calibre de la aguja, tipo de esterilización, nombre genérico del producto, "Desechable", "Radiopaco", número de lote, marca, logotipo, razón social o nombre del fabricante, importador y distribuidor en envase primario, "Estéril", "Atóxico" y "libre de pirógenos" (o leyendas alusivas) 10. Ausencia de número de lote, fecha de caducidad, cualquier instrucción especial para manipuleo y/o almacenaje MAYORES 1. Envase primario sucio, manchado o deteriorado. 2. No cumplir con otros requisitos de etiquetado indicados en la legislación aplicable. 3. Material extraño dentro del producto, fuera del envase primario. 4. Si está ausente alguno de los siguientes datos o leyendas en envase primario: calibre de la aguja, longitud de la aguja, "Producto estéril y libre de pirógenos", "No se garantiza la esterilidad en caso de que el envase primario haya sufrido ruptura previa" (o leyendas alusivas) y número de registro otorgado por la Secretaría de Salud. MENORES 1. Etiquetas rotas y desgarradas, pero con información legible y completa. PACKAGING MATERIAL - CRITICAL 1. <i>Primary packaging different from specified</i> 2. <i>Primary packaging poorly sealed, broken or opened</i> 3. <i>Data or legends of a different product in primary or secondary packaging.</i> 4. <i>Foreign material inside primary packaging</i> 5. <i>Lack of instructions and warnings on primary packaging.</i> 6. <i>Broken pieces.</i> 7. <i>Missing pieces.</i> 8. <i>Disassembled parts.</i> 9. <i>Lack of data or legends or is absent or illegible in primary packaging any the following data: Designation of lumen catheter, Fr caliber or outer diameter of the catheter, nominal length of the catheter, needle gauge, method of sterilization, generic product name, "Disposable", "Radiopaque", lot number, brand, logo, company name or name of the manufacturer, importer and distributor in primary packaging, "Sterile", "Non-toxic" and "pyrogen free" (or allusive legends).</i> 10. <i>Absence of lot number, expiration date, any special instructions for handling and / or storage.</i> MAJOR 1. <i>Primary packaging stained, dirty or damaged.</i> 2. <i>Failure to comply with other labeling requirements indicated in the applicable law.</i> 3. <i>Foreign material inside the product, outside the primary packaging.</i> 4. <i>If any of the following are missing in primary packaging: needle gauge, needle length, "sterile and pyrogen free product", "sterility is not guaranteed if the primary packaging is broken" (or allusive legends) and registration number given by the Ministry of Health.</i> MINOR 1. <i>Labels broken and torn but legible and complete.</i>			
--	--	---	--	--	--


FM002	DIMENSIONES / DIMENSIONS	Catéter radiopaco de silicón (Dimensiones indicadas en tabla anexa): - Calibre (diámetro externo) - Longitud útil Dimensiones críticas del puerto de acuerdo a las presentaciones indicadas en los planos técnicos: A) Longitud del puerto B) Ancho del puerto C) Diámetro del pivote D) Longitud del pivote H) Diámetro del sitio de punción / <i>Radiopaque silicone catheter (Dimensions shown in the attached table):</i> - Caliber (Outer diameter) - Useful length <i>Critical dimensions of the port according to the presentations indicated in the technical drawings:</i> A) Length of the port B) Port width C) Pivot diameter D) Pivot Length H) Diameter of the puncture site	1.0	S-3	FEUM Suplemento para Dispositivos Médicos Monografía de producto
FM003	INTEGRIDAD / INTEGRITY	No debe presentar fuga al aplicar una presión de aire de 0.51 kgf/cm² durante 10s/ <i>Must not leak when applying an 0.51 kgf/cm² air pressure for 10s.</i>	1.0	S-2	FEUM Suplemento para Dispositivos Médicos Método General MGA-DM 0841 Método A
FM004	RESISTENCIA A LOS ENSAMBLES / RESISTANCE OF ASSEMBLIES	El ensamble no debe desprenderse con una fuerza de tensión de 1.5 kgf durante 15 s / <i>The joints must not detach with a tensile force of 1.5 kgf for 15 sec</i>	1.0	S-2	FEUM Suplemento para Dispositivos Médicos Método General MGA-DM 1714
FM006	MARCADO DEL PRODUCTO / PRODUCT MARKING	De acuerdo a la longitud del catéter lleva marcas indicadoras de profundidad en forma legible e indeleble. / <i>According to the length of the catheter, it is marked with legibly and indelibly indicators of depth.</i>	1.0	S-2	FEUM Suplemento para Dispositivos Médicos Monografía de producto
FM049	ACODAMIENTO / BENDING	La longitud de acodamiento para el tubo después del almacenamiento a la temperatura de ensayo es la longitud para la cual el 50% de las muestras se han acodado (tasa de flujo residual menor al 50% de la del tubo recto) / <i>The length of the tube to bending after storage at the test temperature is the length for which 50% of samples have been bent (residual flow rate less than 50% of the straight tube)</i>	1.0	S-2	UNE-EN 13868 Métodos de ensayo del acodamiento de catéteres de un solo lumen y de tubos médicos. Anexo B (largo plazo)

FM058	RADIOPACIDAD / RADIOPACITY	Catéter debe cumplir la prueba / <i>Cathter must meet the test</i>	1.0	S-2	FEUM Suplemento para Dispositivos Médicos Método General MGA-DM 1701
FS005	METALES PESADOS / HEAVY METALS	Plásticos: No más de 1 ppm Hules: No más de 5 ppm / <i>Plastics: no more than 1ppm Rubber: no more than 5 ppm</i>	N/A	N/A	FEUM Suplemento para Dispositivos Médicos Método General MGA 0561 Método I
FS006	ACIDEZ O ALCALINIDAD / ACIDITY OR ALKALINITY	El pH de la muestra no varía en más de 1.0 unidad con respecto al blanco de referencia. / <i>The pH of the sample does not change by more than 1.0 unit with respect to the white reference</i>	N/A	N/A	FEUM Suplemento para Dispositivos Médicos Método General MGA-DM 0001 Método II
FS008	RESISTENCIA A LA CORROSIÓN / CORROSION RESISTANCE	La superficie de las piezas no presenta indicios de corrosión / <i>The surface of the pieces do not show signs of corrosion</i>	1.0	S-2	FEUM Suplemento para DM Método III MGA-DM 1712
FS002	IDENTIFICACIÓN DE PLÁSTICOS / IDENTIFICATION OF PLASTICS	Las muestras analizadas deberán de cumplir con las propiedades generales indicadas / <i>The samples tested must comply with the general properties listed</i>	N/A	N/A	FEUM Suplemento para Dispositivos Médicos Método General MGA-DM 1541
EXTERNO	IMPLANTACIÓN / IMPLANTATION	Los componentes plásticos deben cumplir la prueba. La diferencia no excede de 1.0 o si la diferencia entre los valores de la muestra y el medio de control para cada uno de los cuatro sitios de implante no excede de 1.0 para cualquier material implantado / <i>The plastic components must pass the test. The difference not exceeds 1.0 or if the difference between the sample values and control means for each of the four implant sites does not exceed 1.0 for any implanted material</i>	N/A	N/A	FEUM Suplemento para Dispositivos Médicos Método General MGA-DM 3081
EXTERNO	INYECCIÓN SISTÉMICA / SYSTEMIC INJECTION	Los componentes plásticos deben cumplir la prueba. Los animales tratados no deben presentar reacción biológica significativamente mayor a los tratados con el blanco. / <i>The plastic components must pass the test. Treated animals must not present significantly more biological reactions than the treated targets.</i>	N/A	N/A	FEUM Suplemento para Dispositivos Médicos Método General MGA-DM 3083
EXTERNO	REACTIVIDAD INTRACUTÁNEA / INTRACUTANEOUS REACTIVITY	Los componentes plásticos deben cumplir la prueba. La diferencia entre el valor promedio de reacciones de la muestra y el blanco es de 1.0 o menor. / <i>The plastic components must pass the test. The difference between the sample average value and the target must be 1.0 or less.</i>	N/A	N/A	FEUM Suplemento para Dispositivos Médicos Método General MGA-DM 3171
EXTERNO	ÍNDICE HEMOLÍTICO / HAEMOLYTIC INDEX	La solución del patrón de referencia y la muestra, no deben tener coloración roja. El coeficiente de extinción de la muestra no debe exceder al del patrón de referencia por más de 0.03 / <i>The solution of the reference standard and sample should not be red colored. The extinction coefficient of the sample must not exceed the reference standard by more than 0.03</i>	N/A	N/A	FEUM Suplemento para Dispositivos Médicos Método General MGA 3082
EXTERNO	RESIDUOS DE ÓXIDO DE ETILENO Y ETILENCLORHIDRINA / ETHYLENE OXIDE AND ETHYLENE CHLOROHYDRIN RESIDUES	ETO: 60 mg/30 días / <i>60 mg/ 30 days</i> ECH: 60 mg/30 días / <i>60 mg/ 30 days</i>	N/A	N/A	FEUM Suplemento para Dispositivos Médicos

MB002	ESTERILIDAD / STERILE	Debe ser estéril / <i>Must be sterile.</i>	N/A	N/A	FEUM Suplemento para Dispositivos Médicos MGA-0381
EXTERNO	PIRÓGENOS / PYROGENS	Ningún conejo debe mostrar un incremento individual de 0.5 °C o más con respecto a su temperatura de control. / <i>No rabbit should show a single increment of 0.5 ° C or more with respect to temperature control</i>	N/A	N/A	FEUM Suplemento Para Dispositivos Médicos MGA 0711
EXTERNO	DETERMINACIÓN DE CONTAMINACIÓN POR PARTÍCULAS / DETERMINATION OF PARTICLE POLLUTION	• No debe tener más de 100 partículas de 25 a 50 µm. • No debe tener más de 20 partículas de 51 a 100 µm. • No debe tener partículas mayores de 100 µm / • <i>Must not contain more than 100 particles from 25 to 50 microns</i> • <i>Must not contain more than 20 particles from 51 to 100 microns</i> • <i>Must not contain particles larger than 100microns</i>	N/A	N/A	FEUM Suplemento para Dispositivos Médicos MGA-DM 0253


COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	5Fr x 50cm	7Fr x 50cm	9Fr x 50cm
	Puerto de titanio con goma de silicón	9 Fr	Puerto vascular 9 Fr seguro roscado metálico	
		7 Fr	Puerto vascular 7 Fr seguro roscado metálico	
		5 Fr	Puerto vascular 5 Fr seguro roscado metálico	
	Tubo de silicón radiopaco	5.0 Fr	7.0 Fr	9.0 Fr
	Diámetro externo (mm)	1.550 a 1.750	2.324 a 2.456	2.930 a 3.197
	Longitud útil (cm)	49.5 a 50.5		

Puerto vascular 9 Fr - seguro roscado metálico

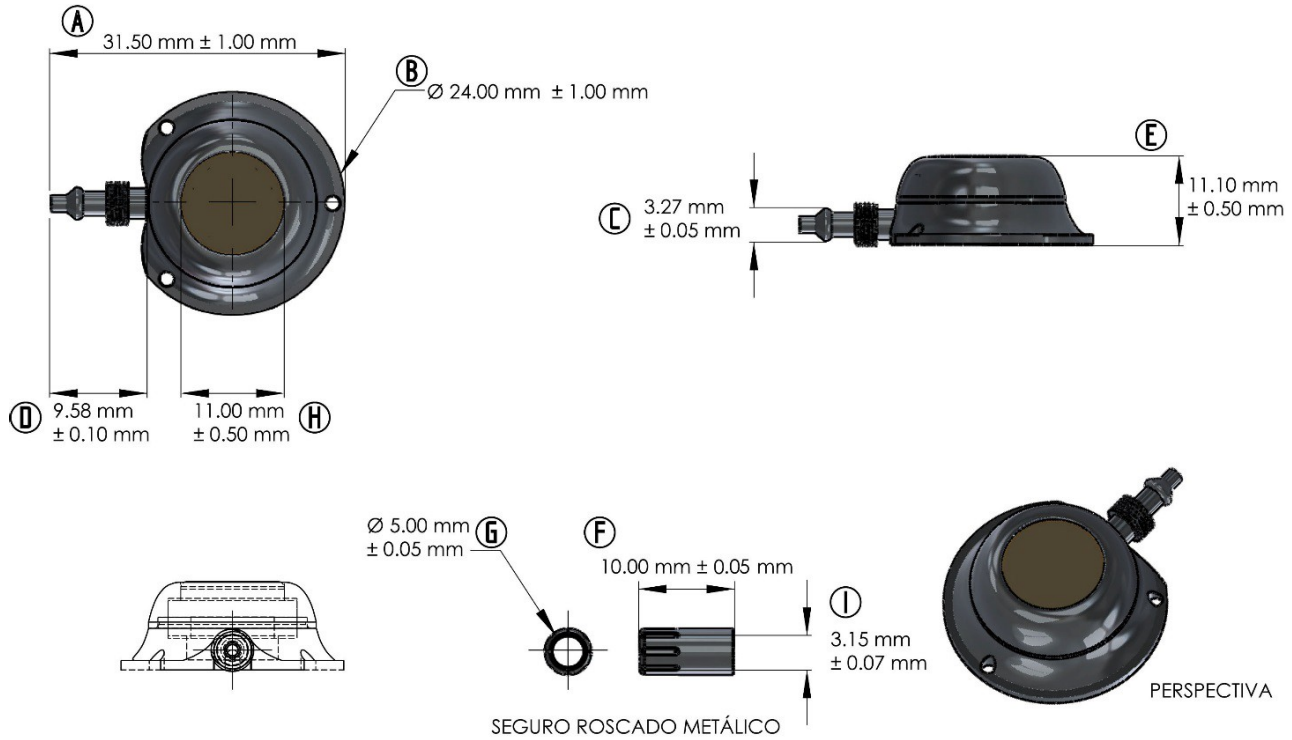


Nota: A menos de que especifique lo contrario, todas las medidas están en mm

Puerto vascular 7 Fr - seguro roscado metálico

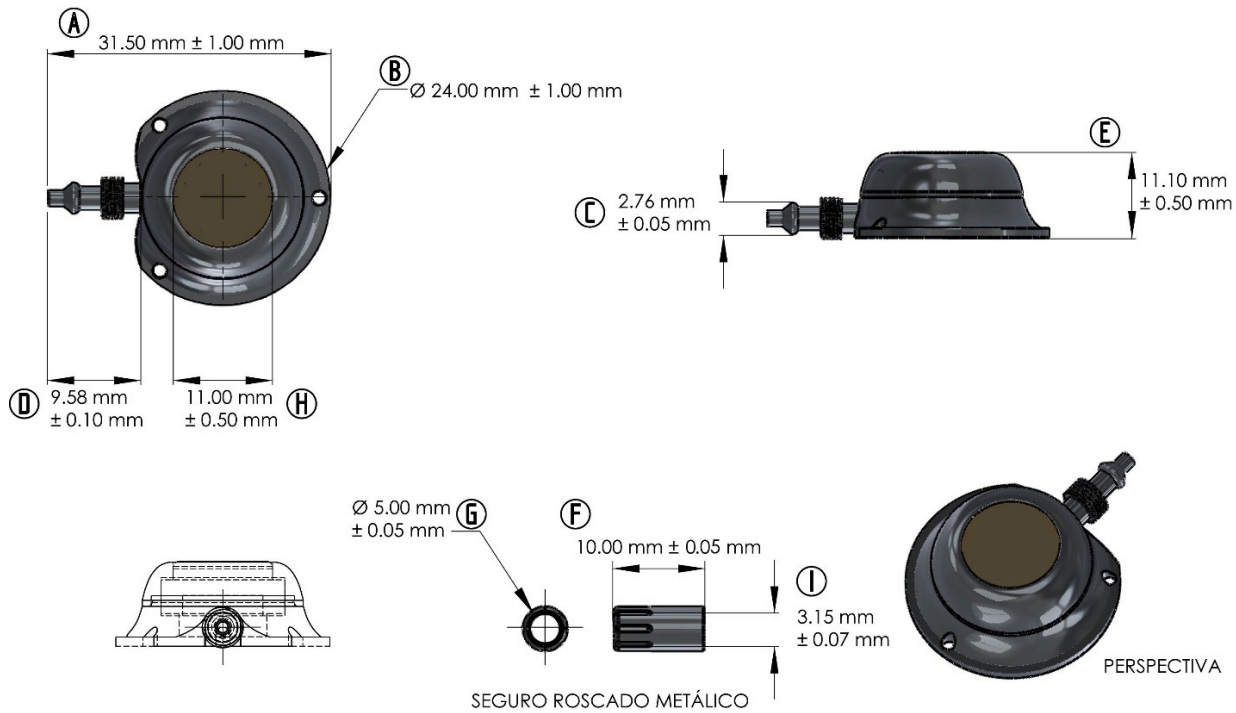

Nota: A menos de que especifique lo contrario, todas las medidas están en mm

Puerto vascular 5 Fr - seguro roscado metálico

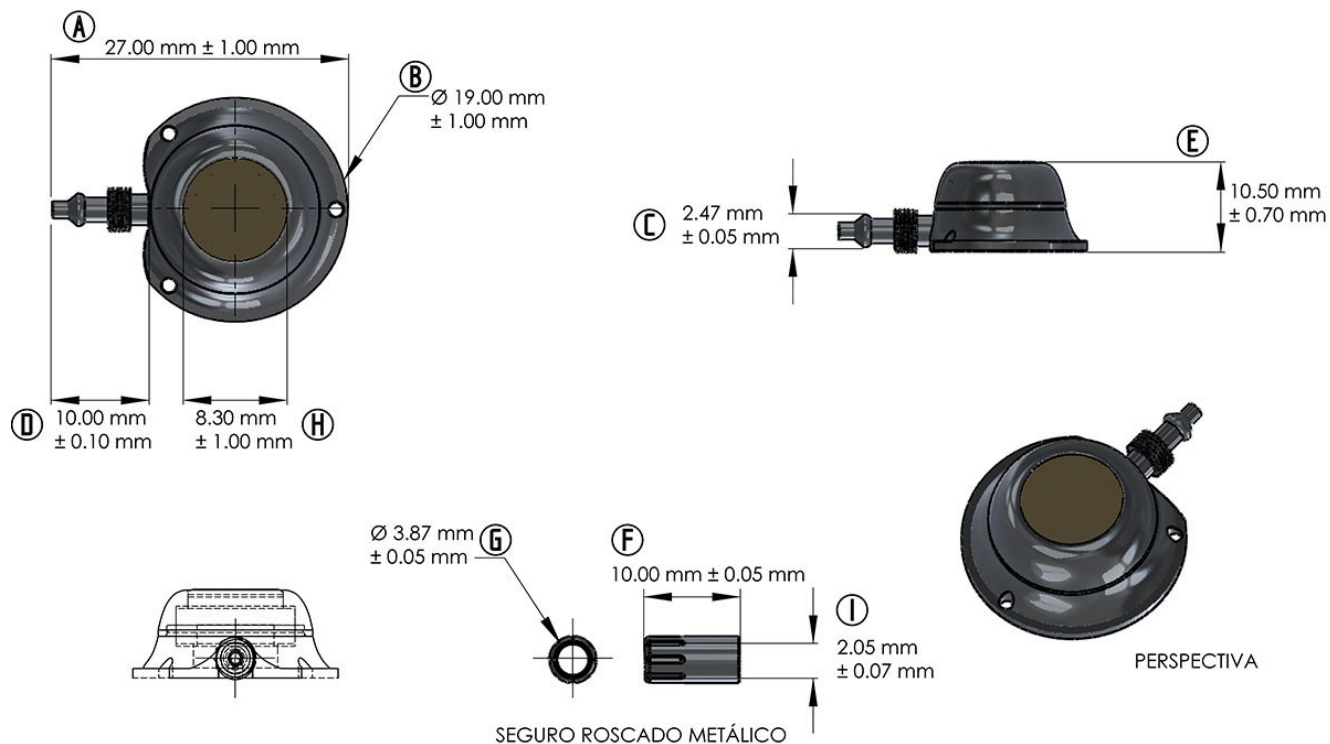

Nota: A menos de que especifique lo contrario, todas las medidas están en mm